

Termômetro Para Testa



Monitor de Temperatura de Cristal Líquido

Os termômetros de cristal líquido para a testa fornecem temperaturas precisas de forma rápida e fácil.

Durante qualquer epidemia, a detecção prematura da febre além de ajudar a prevenir o alastramento da doença, também garante o tratamento mais rápido. Os termômetros para testa, utilizam tecnologia de cristal líquido, são aprovados pelo FDA e permitem monitorar a temperatura do corpo de uma forma simples, rápida e econômica.

Se recomenda que trabalhadores de serviços essenciais tenham a temperatura monitorada antes de entrarem nas instalações onde irão trabalhar.

- Adesivo de fixação
- Modelos Descartáveis ou reutilizáveis
- Feito nos Estados Unidos

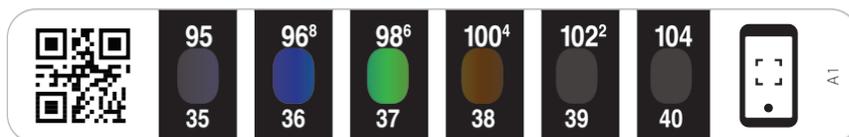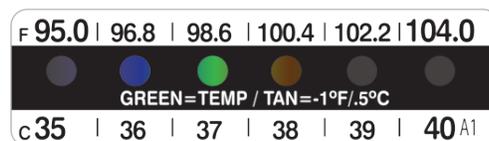


Esteja Pronto Para o Inesperado

FOs termômetros de testa são uma maneira rápida e precisa para monitorar a temperatura do corpo. Você obtém a temperatura precisa em apenas 15 segundos. Basta observar o display de cristal líquido até que a cor pare de mudar. E como você pode verificar a Temperatura de forma não invasiva, os termômetros de Testa são ideais para utilizar em crianças, pacientes em Pós-operatório e pessoas em quarentena.


Leitura de Temperatura Rápida e Precisa

Com a segurança de anos de pesquisas, tecnologia de produção e projetados para ter longa vida de prateleira; os termômetros de testa são uma Ferramenta essencial durante epidemias.

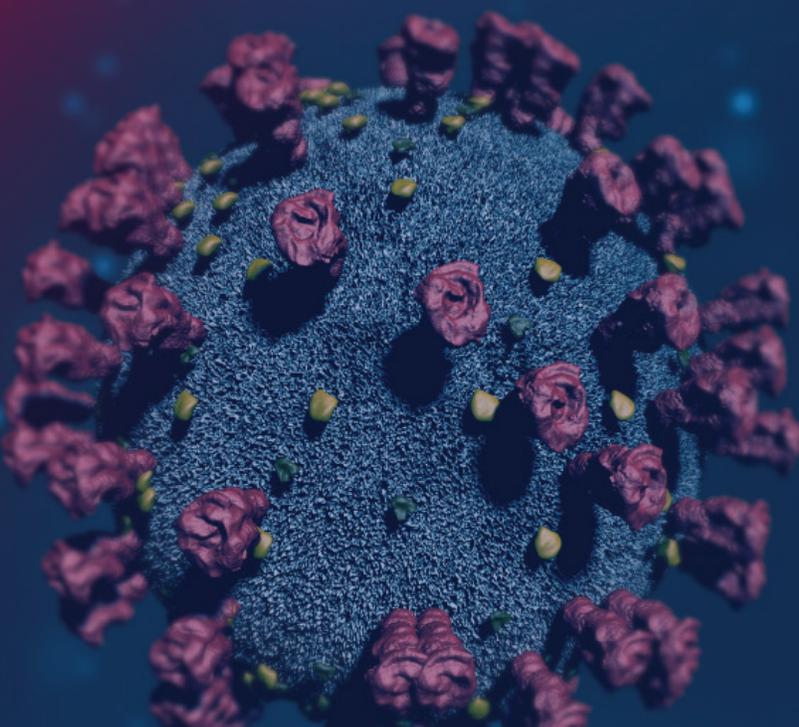

Termômetro Para Testa

Dimensões

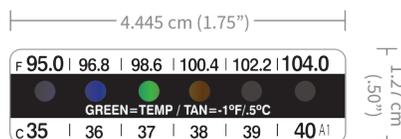

C-8786 - Termômetro de Testa oC e oF

Faixa de Temperatura: 35°C/95°F, 36°C/96°F, 37°C/98°F, 38°C/100°F, 39°C/102°F, 40°C/104°F

Dimensões: 4.45 cm x 1.27 cm

Aplicação: Descartável, adesivo



C-8720 - Termômetro de Testa oC e oF

Faixa de Temperatura: 35°C/95°F, 36°C/96°F, 37°C/98°F, 38°C/100°F, 39°C/102°F, 40°C/104°F

Dimensões: 7.17 cm x 1.44 cm

Aplicação: Reutilizável, adesivo

Instruções de uso: No QR code

Especificações

Modelos	Dupla Escala- Fahrenheit e Celsius Sem adesivo ou com adesivo antialérgico Descartável ou reutilizável
Escala	35°C a 40°C
Precisão	+/- 1°C
Classificação	Dispositivo Médico Classe 2 (FDA) Dispositivo Médico Classe I EU 2017/745 ISO9001:2015
Vida de Prateleira	2 anos
Fixação	Adesivo descartável ou não adesivo reutilizável
Embalagem	Vendido em pacotes de 100 unidades ou Rolos com 5000 unidades

Instruções de Uso

Os termômetros devem ser usados em ambientes fechados e em temperatura ambiente (aproximadamente 20°C - 30°C). Evite a luz solar direta ou o calor forte ao tirar a temperatura. Não tome temperatura se o indivíduo tiver comido, bebido ou se exercitado nos últimos 30 minutos devido à possibilidade de flutuação de temperatura.

1. Remova a película traseira.
2. Prenda o termômetro na testa pressionando as duas extremidades e aguarda aproximadamente 15 segundos.
3. Leia o termômetro enquanto estiver na testa – Verde: Temperatura Exata
 - Azul ou Marrom indicam variação de 0.5 grau
 - Azul: Adicione 0.5°C / Marrom: subtraia 0.5°C

